

Animal Pet MicroÉbrécher 2.12 * 12 mm RFID Pet Microchip ISO11784 / 85 LF 134.2 kHz
Identification Microchip



Spécification

Spécification

Nom de produit	Puce de suivi de cheval micro-puce Microchip pour animaux de bétail pour chats microchip
Chip	EM4305
Fréquence	125 kHz
Distance de lecture	3-20cm dépendent de votre lecteur et de votre puce
Matériel	Bio-verre
Protocole	ISO14443A
Taille	2 * 12 mm, 3 * 15 mm, 1,4 * 8 mm, 1,25x7 mm, etc.
Méthode de désinfection	EO (ACM)

Taper	Passif
Lieu d'origine	Guangdong, Chine
Mémoire	144 byte / 504 byte / 888 byte
Échantillons	Les échantillons sont gratuits pour votre test de qualité.
Application	Chats, chiens, souris de laboratoire, vison pour animaux de compagnie, arowana, saumon, chevaux, suivi des lapins, etc.

Description du produit

Description du produit




PRODUCT INFORMATION



1.25*7mm 1.4*8mm 2.12*12mm

SMALL SIZE WITHOUT AFFECTING PERFORMANCE

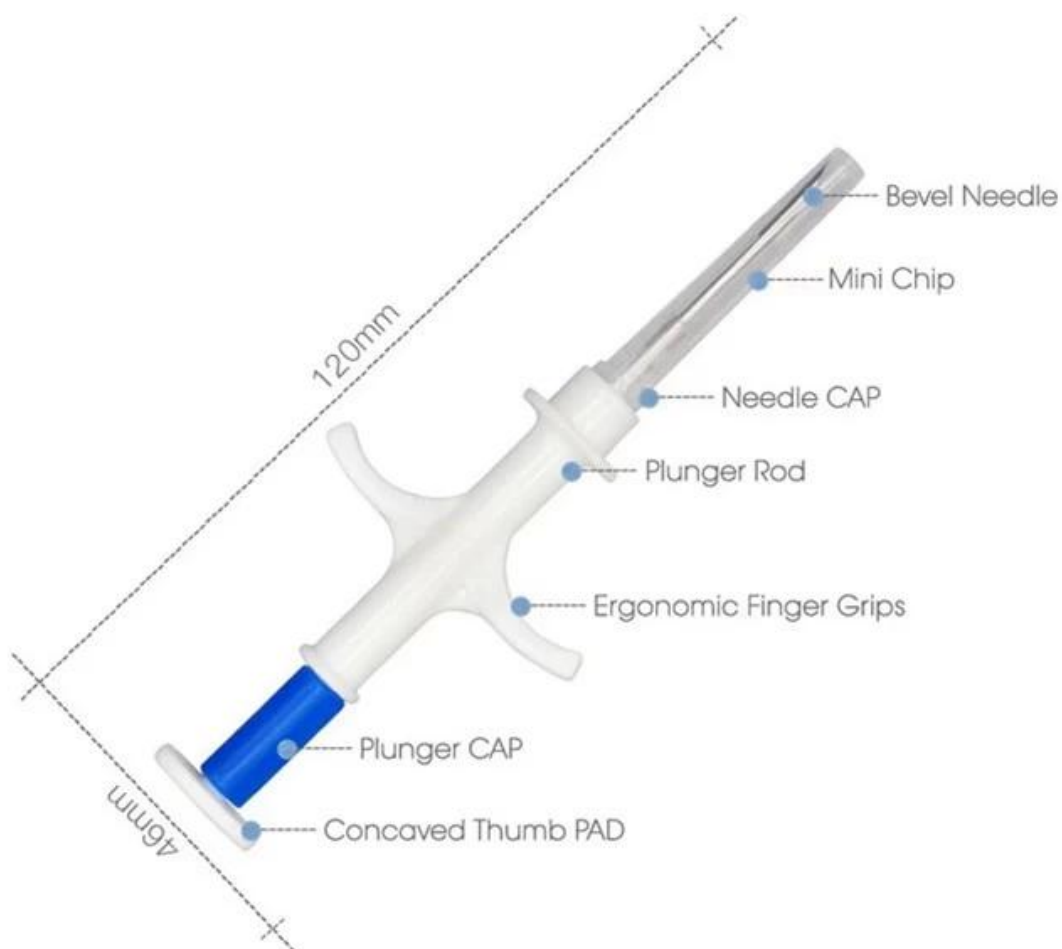

ISO STANDARD
INTERNATIONAL STANDARD



Injector



Glass tag



ICAR certificated



Pet informatin tracking



- 134.2K/125K FDX-B format with 16-bit encoding, most scanners can be read
- Small size and light weight
- Quickly and safely injects under the surface of pet's skin
- Wide range of applications, suitable for most pets, animal husbandry, fish, wildlife, etc.

WORKING PRINCIPLE

How Does Animal Microchip Work?



1. Scan the pet to verify whether he or she has a microchip that has been previously implanted.



2. Scan the microchip pack to verify that the microchip is functional, and that the ID code matches the accompanying barcode labels.



3. Implant the microchip, then rescan the pet to verify that the microchip can be localized.



4. Do not forget to record the tracking number of the microchip.

Implantation Sites for Microchips



Microchips are most often implanted in animals as outlined in the diagrams above. When scanning dogs and cats, begin in the neck area where the microchip is most likely to be located, but be sure to scan slowly and patiently. Scan repeatedly and over the entire body to ensure whether or not a microchip can be localized.

CUSTOMIZATION



Anti bacterial

Anti bacterial



Easily implanted

Easily implanted



Anti allergy

Anti allergy

SUITABLE FOR ALL KINDS OF ANIMALS



Pet Hospital



Animal husbandry



Species reproduction



Biological identification



Emballage et livraison

Emballage et livraison

Package Process



SHIPPING



If your delivery time is very urgent, we suggest you choose by courier or by air.



If it is not very urgent, we will suggest you choose by sea, it is very cheap.



Pour mieux garantir la sécurité de vos produits, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratique et efficaces seront fournis.