

Description du produit



Implant de micropuces de suivi d'étiquette RFID pour l'animal

L'étiquette de capsule en verre rfid offre des rapports taille / performances exceptionnels, à la fois dans les applications basse fréquence (125 KHz et 134,2 KHz) et haute fréquence (13,56 MHz).

Ils peuvent être intégrés dans des boîtiers personnalisés et montés sur pratiquement toutes les surfaces, telles que le métal, le plastique, le bois, le papier et l'eau, ce qui les rend idéaux pour suivre toute forme d'actif.

L'étiquette de capsule en verre rfid 125KHz offre une plus grande performance de plage de lecture que n'importe quelle étiquette rfid 125khz de taille comparable.

Traits:

- ◆ Spécialement conçu pour l'identification des animaux
- ◆ Encapsulation de verre biocompatible
- ◆ Petite taille avec une longue portée de lecture requise
- ◆ Anti-collision disponible en LF et HF
- ◆ Résistance illimitée à l'eau et à l'absorption chimique
- ◆ Haute stabilité aux températures fluctuantes

spécification



s
p
é
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n

Ñ
b
m
q
u
ø
r
b
d
d
è
t
u
b
e
e
n
v
e
r
r
e
a
n
i
m
a
l
R
F
I
D
M
à
o
é
r
à
s
s
Ø
M

3
5
h
N
e
A
G
2
e
6

T
a
1
2
†
e
2
m
m
/
1
,
2
5
*
7
m
m
/
1
,
4
*
8
m
m

A
p
p
h
t
ic
h
t
ic
a
h
i
o
n
o
u
s
u
i
v
i
d
e
s
a
n
i
m
a
u
x

T
5
n
P
5
C
a
t
u
r
e
d
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
P
h
a
g
m
d
e
l
e
c
t
u
r
e

Une partie de nos puces HF, pour plus de puces RFID (LF, HF, UHF et double fréquence, veuillez nous contacter librement)

Protocole ISO / CEI 14443A:

1. MIFARE Classic® 1K, MIFARE Classic® EV1 1K, MIFARE Classic® 4K

MIFARE et MIFARE Classic sont des marques déposées de NXP B.V. et sont utilisées sous licence.

2. MIFARE Plus® S 1K, MIFARE Plus® S 1K SE, MIFARE Plus® S 2K / S 4K, MIFARE Plus® X 2K / X 4K, MIFARE

Plus® EV1 2K / 4K

MIFARE et MIFARE Plus sont des marques déposées de NXP B.V. et sont utilisées sous licence.

3. MIFARE® DESFire®

MIFARE® DESFire® 2K / EV1 2K / EV2 2K

MIFARE® DESFire® 4K / EV1 4K / EV2 4K

MIFARE® DESFire® 8K / EV1 8K / EV2 8K

MIFARE DESFire sont des marques déposées de NXP B.V. et sont utilisées sous licence.

4. Forum NFC de type 2:

1) NTAG® 203 (144 octets), NTAG® 213 (144 octets), NTAG® 215 (504 octets), NTAG® 216 (888 octets), NTAG® 210 (48 octets), NTAG® 212 (128

octets) NTAG® sont des marques déposées de NXP B.V. et sont utilisées sous licence.

2) MIFARE Ultralight® (48 octets) MIFARE Ultralight® EV1 (48 octets / 128 octets) MIFARE Ultralight® C (148 octets)

MIFARE et MIFARE Ultralight sont des marques déposées de NXP B.V. et sont utilisées sous licence.

Protocole ISO 15693 / ISO 18000-3:

ICODE® SLIX, ICODE® SLIX-S, ICODE® SLIX-L, ICODE® SLIX 2

ICODE® sont des marques déposées de NXP B.V. et sont utilisées sous licence.

Détails Images

How Does Animal Microchip Work?



1. Scan the pet to verify whether he or she has a microchip that has been previously implanted.



2. Scan the microchip pack to verify that the microchip is functional, and that the ID code matches the accompanying barcode labels.



3. Implant the microchip, then rescan the pet to verify that the microchip can be localized.



4. Do not forget to record the tracking number of the microchip.

Implantation Sites for Microchips



Microchips are most often implanted in animals as outlined in the diagrams above. When scanning dogs and cats, begin in the neck area where the microchip is most likely to be located, but be sure to scan slowly and patiently. Scan repeatedly and over the entire body to ensure whether or not a microchip can be localized.



WHY YOU CHOOSE US AS YOUR PARTNER



NO. 1 MATERIAL

Material is medical grade bio-glass
with working life as long as 20 years

NO. 2 STERILIZATION

Sterilized by EO for 48 hours to
protect animal from being infected.

Safe enough to be injected
into animal body.



NO. 3 CHIP

Imported original chip. Long reading range and long working life




ISO11784/5, FDX-B, Chip Type: EM4305

ISO14443A/15693, Chip Type: NFC 216, etc

NO. 4 VARIOUS SIZES



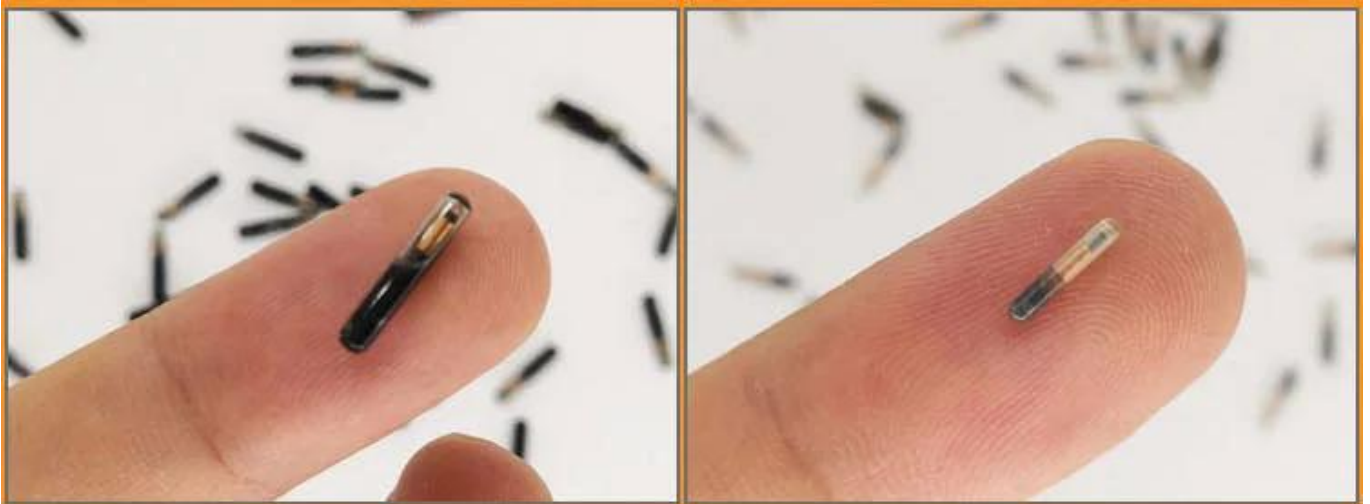


NO. 5 **VARIOUS MODELS AND COLORS**

SYRINGES FOR ANIMAL ID TAGS



Application

APPLICATION

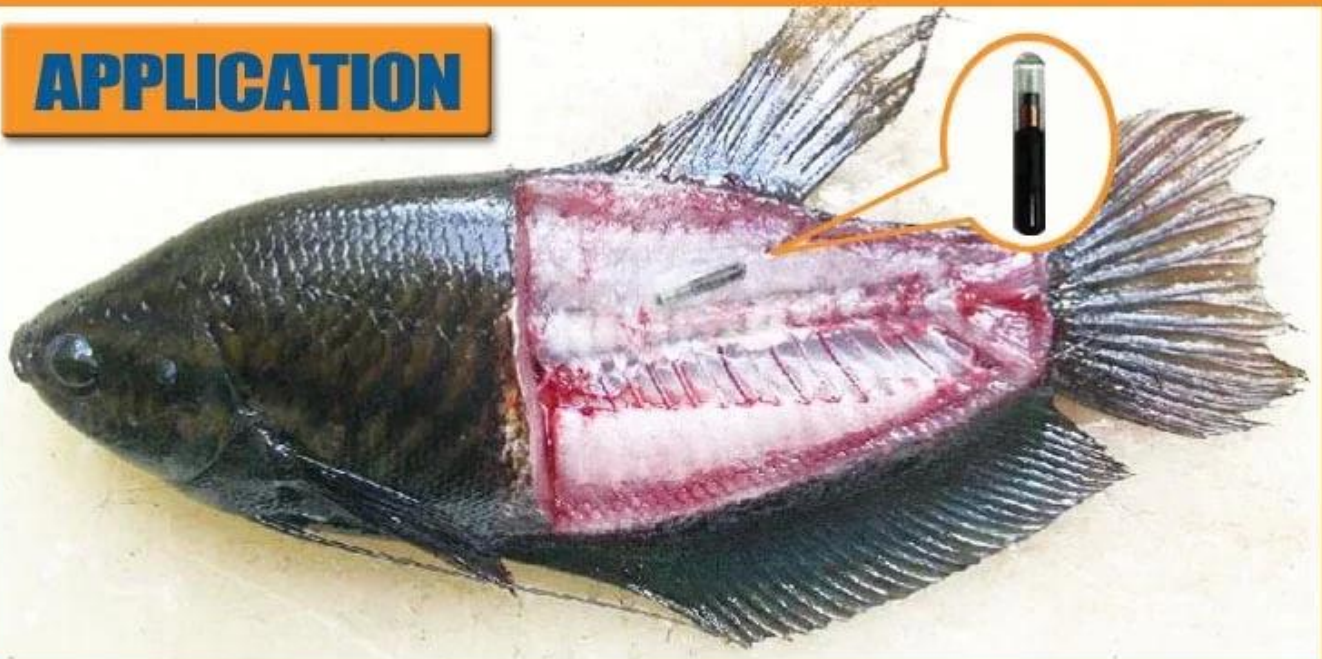

Fish tracking



Big Animal ID



Pet ID



Small animal ID



Bird ID

Emballage et livraison

PACKING



1



2



3



4

Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondues dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM Disponible
- 4, de haute qualité, desing de mode, prix raisonnable et compétitif, délai d'exécution rapide
- 5, Service après-vente :
 - 1), tous les produits auront été strictement contrôlés en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, Livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal, assurance commerciale Ali
- 8, expédition: Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par l'homme,

ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits relatifs.

- Au contraire, ACM Goldbridge coûtera un supplément en cas de réparation.
- Plus d'informations, veuillez parcourir notre centre de service.

Notre compagnie

Société industrielle ACM Shenzhen Goldbridge

En tant que l'un des principaux fabricants et exportateurs de produits RFID et de contrôle d'accès et de serrures de porte électriques en Chine, nous sommes dans ce domaine depuis 20 ans déjà. Nous avons une riche expérience de production et d'exportation sur les produits de serrures de contrôle d'accès RFID. Nos produits de force sont: Carte RFID, porte-clés RFID, bracelet RFID, étiquette RFID et divers lecteurs RFID, lecteur UHF longue portée, serrures de porte électriques, . Nous sommes également le fournisseur de solutions de contrôle d'accès.



Nous contacter

S'il vous plaît envoyez-nous une demande et commandez maintenant pour avoir votre échantillon gratuit en 3 jours !!!

Nous sommes professionnels et nous nous assurons de pouvoir offrir la meilleure solution de fournisseur de produits de contrôle d'accès de carte rfid de sécurité complète avec 20 ans d'expérience,

Alors, contactez-nous et envoyez vos détails de demande ci-dessous maintenant!

Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients du monde entier à l'avenir!



**SHENZHEN GOLDBRIDGE
INDUSTRIAL CO., LTD**

Adresse:

Bâtiment 405, zone industrielle de
Shangbu, quartier de Futian,
Shenzhen Chine, 518031

Tél: + 0086-755-83767678 Fax: +
0086-755-88391348

Personne de contact: Lily Jiang

Mob / whatsapp / wechat: +
0086-13554918707

Skype: lily-jiang1206

Courriel: sales (at) goldbridge sz.com

Site Web: [http: // www. goldbridge
sz.com](http://www.goldbridge.sz.com)