

وصف المنتج



علامة تتبع زرع الرقائق الدقيقة للحيوان RFID

حجمًا استثنائيًا لنسب الأداء ، في كل من تطبيقات التردد المنخفض rfid توفر علامة الكبسولة الزجاجية ((125 كيلو هرتز و 134.2 كيلو هرتز) والتردد العالي (13.56 ميغا هرتز). يمكن تضمينها في علب مخصصة ووضعها على أي سطح تقريبًا ، مثل المعدن والبلاستيك والخشب والورق والمياه ، مما يجعلها مثالية لتتبع أي شكل من أشكال الأصول. أداء نطاق قراءة أكبر من أي rfid توفر علامة الكبسولة الزجاجية التي تبلغ سعتها 125 كيلو هرتز. كيلو هرتز ذات حجم مماثل 125 rfid علامة

مميزات:

- ◆ مصمم خصيصًا للتعرف على الحيوانات
- ◆ تغليف زجاجي متوافق بيولوجيًا
- ◆ حجم صغير مع نطاق قراءة طويل مطلوب
- ◆ HF و LF متوفر مضاد للتصادم في
- ◆ مقاومة غير محدودة للماء وامتصاص المواد الكيميائية
- ◆ ثبات عالي على درجات حرارة متقلبة

تخصيص





E
M
4
3
3
7
N
T
A
G
2
1
6
2
0
0
2
*
1
2
0
0
0
/
1
.
2
5
*
7
0
0
0
/
1
.
4
*
8
0
0
0



والتردد المزدوج ، يرجى الاتصال بنا بحرية) ، UHF ، HF ، LF) RFID لدينا ، لمزيد من رقائق HF جزء من رقائق

بروتوكول ISO / IEC 14443A:

1.MIFARE Classic® 1K ، MIFARE Classic® EV1 1K ، MIFARE Classic® 4K

ويتم استخدامهما بموجب ترخيص. NXP B.V. هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة MIFARE و MIFARE Classic

2. MIFARE Plus® S 1K ، MIFARE Plus® S 1K SE ، MIFARE Plus® S 2K / S 4K ، MIFARE Plus® X 2K / X 4K ،
MIFARE

Plus® EV1 2K / 4K

ويتم استخدامها بموجب ترخيص. NXP B.V. هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة MIFARE و MIFARE Plus

3. MIFARE® DESFire®

MIFARE® DESFire® 2K / EV1 2K / EV2 2K

MIFARE® DESFire® 4K / EV1 4K / EV2 4K

MIFARE® DESFire® 8K / EV1 8K / EV2 8K

ويتم استخدامها بموجب ترخيص. NXP B.V. هي علامات تجارية مسجلة لشركة MIFARE DESFire

4. NFC Forum 2: النوع

1) NTAG® 203 (144 بايت) ، NTAG® 213 (144 بايت) ، NTAG® 215 (504 بايت) ، NTAG® 216 (888 بايت) ،
NTAG® 210 (48 بايت) ، NTAG® 212 (128 بايت)

ويتم استخدامها بموجب ترخيص. NXP B.V. هي علامات تجارية مسجلة لشركة NTAG® (بايت)

2) MIFARE Ultralight® (48 بايت) MIFARE Ultralight® EV1 (128 بايت / 48 بايت) MIFARE Ultralight® C (148 بايت)

ويتم استخدامها بموجب ترخيص. NXP B.V. هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة MIFARE و MIFARE Ultralight

ISO 15693 / ISO 18000-3: بروتوكول

ICODE® SLIX 2 و ICODE® SLIX-L و ICODE® SLIX-S و ICODE® SLIX

ويتم استخدامها بموجب ترخيص. NXP B.V. هي علامات تجارية مسجلة لشركة ICODE®

تفاصيل الصور

How Does Animal Microchip Work?



1. Scan the pet to verify whether he or she has a microchip that has been previously implanted.



2. Scan the microchip pack to verify that the microchip is functional, and that the ID code matches the accompanying barcode labels.



3. Implant the microchip, then rescan the pet to verify that the microchip can be localized.



4. Do not forget to record the tracking number of the microchip.

Implantation Sites for Microchips



Microchips are most often implanted in animals as outlined in the diagrams above. When scanning dogs and cats, begin in the neck area where the microchip is most likely to be located, but be sure to scan slowly and patiently. Scan repeatedly and over the entire body to ensure whether or not a microchip can be localized.



WHY YOU CHOOSE US AS YOUR PARTNER



NO. 1 MATERIAL

Material is medical grade bio-glass
with working life as long as 20 years

NO. 2 STERILIZATION

Sterilized by EO for 48 hours to
protect animal from being infected.

Safe enough to be injected
into animal body.



NO. 3 CHIP

Imported original chip. Long reading range and long working life




ISO11784/5, FDX-B, Chip Type: EM4305

ISO14443A/15693, Chip Type: NFC 216, etc

NO. 4 VARIOUS SIZES



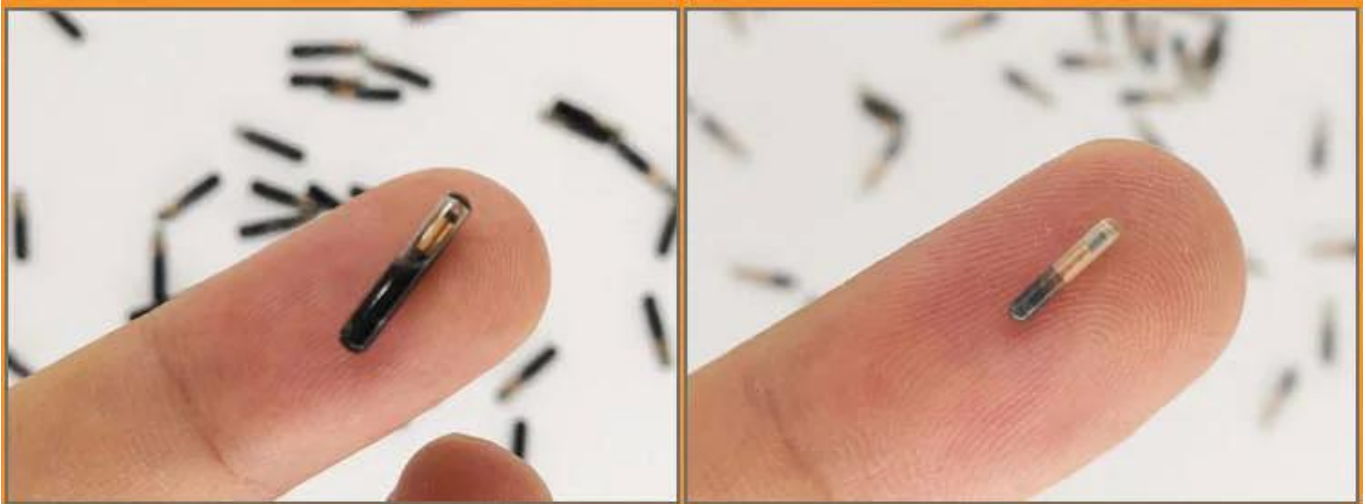


NO. 5 **VARIOUS MODELS AND COLORS**

SYRINGES FOR ANIMAL ID TAGS



تطبيق

APPLICATION

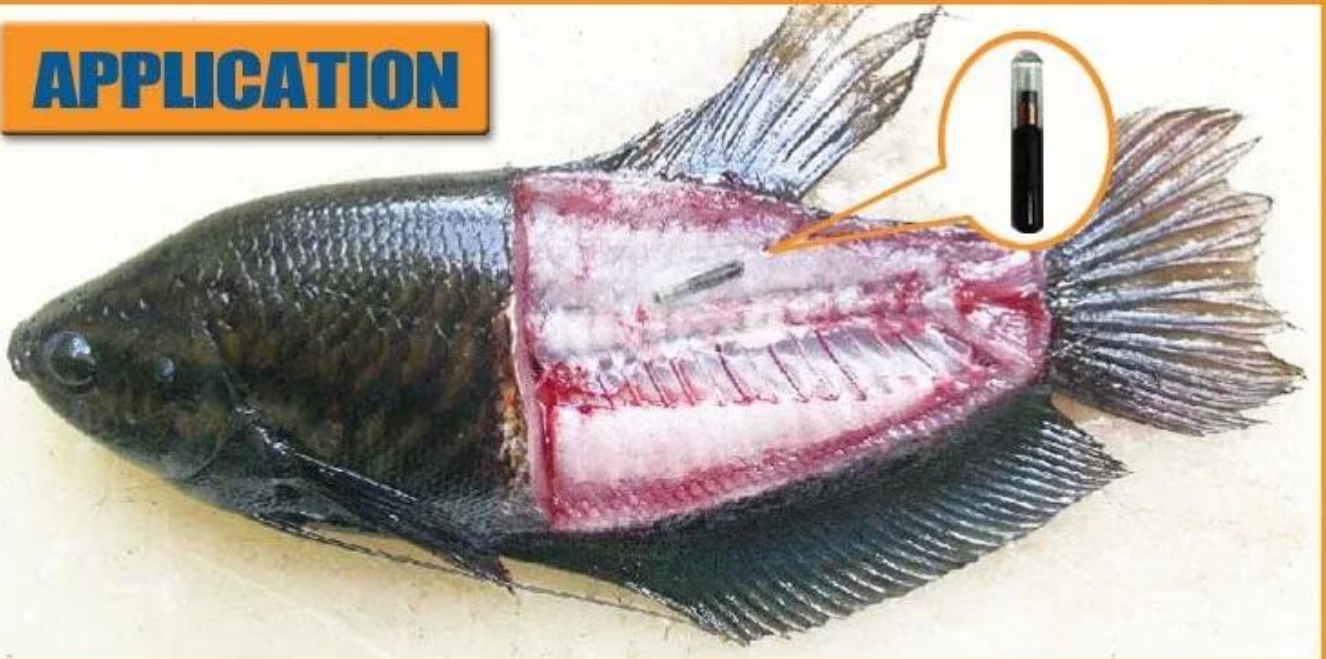

Fish tracking



Big Animal ID



Pet ID



Small animal ID



Bird ID

التعبئة والتسليم

[illegible]



**GOLDBRIDGE INDUSTRIAL
CO., LTD**

: 000000

0000000000 0000000 000000 0 405 0000
518031 0 000000 000000 0 0000000 000000
+ :00000 83767678-755-0086 + :00000
88391348-755-0086

00000000 0000: Lily Jiang

Mob / whatsapp / wechat: +
0086-13554918707

000000: lily-jiang1206

000000000000 0000000: sales (at)
goldbridge sz.com

0000000: [http: // www. goldbridge
sz.com](http://www.goldbridge
sz.com)