

Descrizione del prodotto



Impianto di microchip di tracciamento di tag RFID per animali

Il tag della capsula in vetro RFID offre rapporti eccezionali tra dimensioni e prestazioni, sia in applicazioni a bassa frequenza (125 KHz e 134,2 KHz) che ad alta frequenza (13,56 MHz).

Potrebbero essere incorporati in custodie personalizzate e montati praticamente su qualsiasi superficie, come metallo, plastica, legno, carta e acqua, rendendoli ideali per il monitoraggio di qualsiasi forma di risorsa.

Il tag della capsula in vetro rfid da 125 KHz offre una maggiore portata di lettura rispetto a qualsiasi tag rfid da 125 kHz di dimensioni comparabili.

Caratteristiche:

- ◆ Progettato specialmente per l'identificazione degli animali
- ◆ Incapsulamento in vetro biocompatibile
- ◆ Richiesto formato piccolo con ampio raggio di lettura
- ◆ Disponibile anticollisione in LF e HF
- ◆ Resistenza illimitata all'acqua e all'assorbimento chimico
- ◆ Elevata stabilità al variare della temperatura

Specifica



S
p
e
c
i
f
i
c
a

N
o
m
e
n
e
t
p
a
p
e
o
t
t
b
o
d
i
v
e
t
r
o
a
n
i
m
a
l
e
R
F
I
D
M
a
o
g
r
a
a
s
e

0
M
4
3
5
h
h
E
A
G
P
1
6
2
a
g
2
†
h
2
m
m
/
1
,
2
5
*
7
m
m
/
1
,
4
*
8
m
m

A
p
p
h
t
i
c
h
i
z
i
c
a
n
è
o
n
e
o
t
r
a
c
c
i
a
m
e
n
t
o
d
e
g
l
i
a
n
i
m
a
l
i

T
S
S
P
S
C
a
t
u
r
a
d
i
l
a
v
o
r
o
I
n
S
e
m
v
a
l
l
o
d
i
l
e
t
t
u
r
a

Parte dei nostri chip HF, per più chip RFID (LF, HF, UHF e doppia frequenza, contattaci liberamente)

Protocollo ISO / IEC 14443A:

1. MIFARE Classic® 1K, MIFARE Classic® EV1 1K, MIFARE Classic® 4K

MIFARE e MIFARE Classic sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza.

2. MIFARE Plus® S 1K, MIFARE Plus® S 1K SE, MIFARE Plus® S 2K / S 4K, MIFARE Plus® X 2K / X 4K,
MIFARE

Plus® EV1 2K / 4K

MIFARE e MIFARE Plus sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza.

3. MIFARE® DESFire®

MIFARE® DESFire® 2K / EV1 2K / EV2 2K

MIFARE® DESFire® 4K / EV1 4K / EV2 4K

MIFARE® DESFire® 8K / EV1 8K / EV2 8K

MIFARE DESFire sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza.

4. Forum NFC di tipo 2:

1) NTAG® 203 (144 byte), NTAG® 213 (144 byte), NTAG® 215 (504 byte), NTAG® 216 (888 byte), NTAG® 210 (48 byte), NTAG® 212 (128

bytes) NTAG® sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza.

2) MIFARE Ultralight® (48 byte) MIFARE Ultralight® EV1 (48 byte / 128 byte) MIFARE Ultralight® C (148 byte)

MIFARE e MIFARE Ultralight sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza.

Protocollo ISO 15693 / ISO 18000-3:

ICODE® SLIX, ICODE® SLIX-S, ICODE® SLIX-L, ICODE® SLIX 2

ICODE® sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza.

Immagini di dettagli


How Does Animal Microchip Work?



1. Scan the pet to verify whether he or she has a microchip that has been previously implanted.



2. Scan the microchip pack to verify that the microchip is functional, and that the ID code matches the accompanying barcode labels.

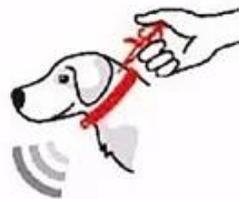

3. Implant the microchip, then rescan the pet to verify that the microchip can be localized.



4. Do not forget to record the tracking number of the microchip.

Implantation Sites for Microchips



Microchips are most often implanted in animals as outlined in the diagrams above. When scanning dogs and cats, begin in the neck area where the microchip is most likely to be located, but be sure to scan slowly and patiently. Scan repeatedly and over the entire body to ensure whether or not a microchip can be localized.

WHY YOU CHOOSE US AS YOUR PARTNER



NO. 1 MATERIAL

Material is medical grade bio-glass with working life as long as 20 years

NO. 2 STERILIZATION


Sterilized by EO for 48 hours to protect animal from being infected.

Safe enough to be injected into animal body.



NO. 3 CHIP

Imported original chip. Long reading range and long working life

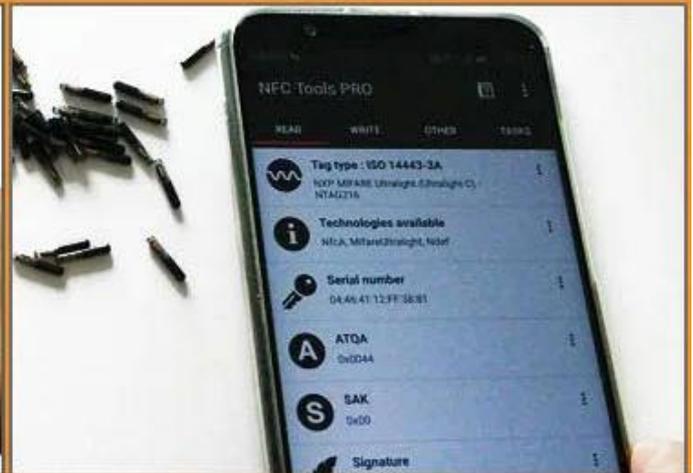

ISO11784/5, FDX-B, Chip Type: EM4305

ISO14443A/15693, Chip Type: NFC 216, etc

NO. 4 VARIOUS SIZES



1.25x7

1.4x8

2.12x8

1.4x10


2.12x12

3x15

4x23

4x32

4x34

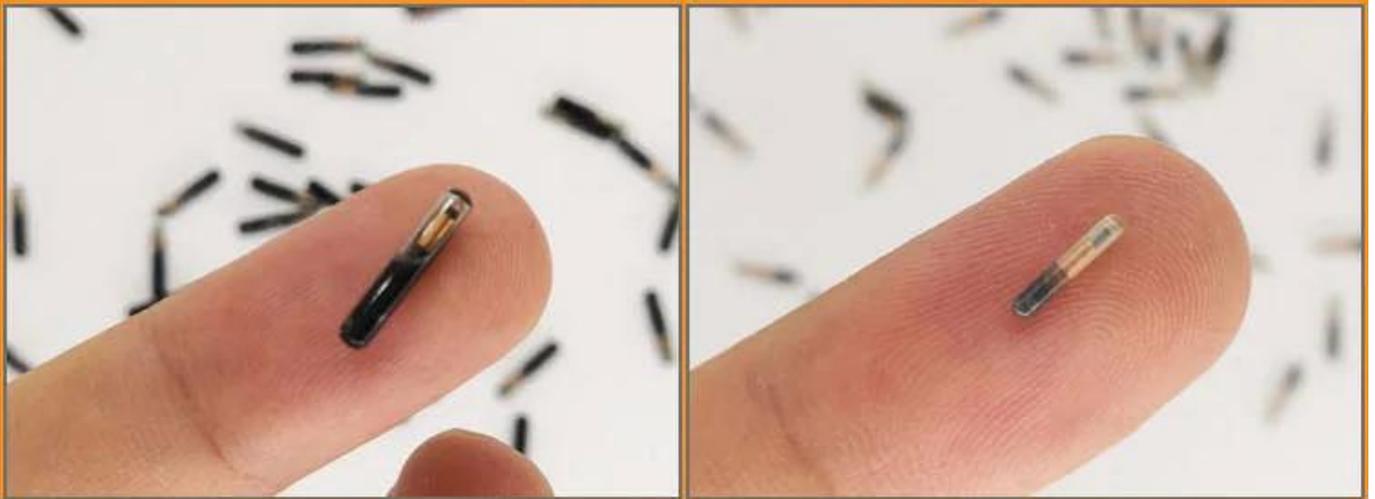


NO. 5  **VARIOUS MODELS AND COLORS**
SYRINGES FOR ANIMAL ID TAGS



Applicazione

APPLICATION

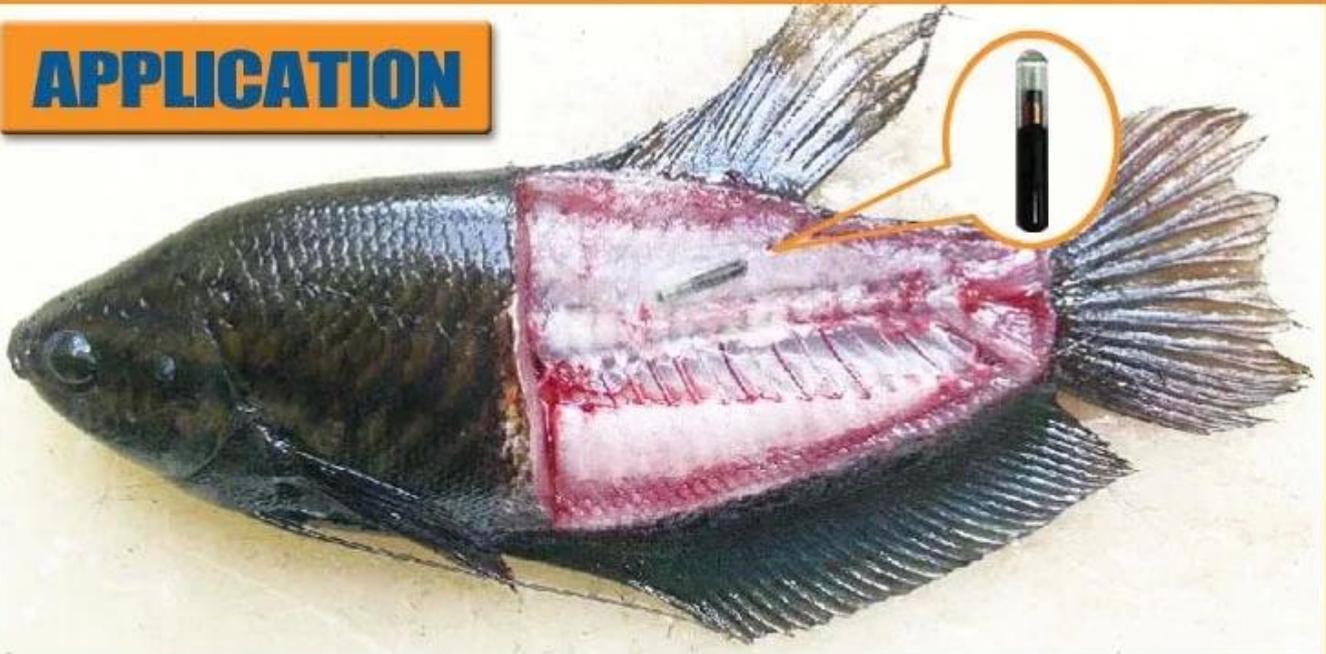

Fish tracking



Big Animal ID



Pet ID



Small animal ID



Bird ID



Imballaggio e consegna

PACKING



Nostro servizio

- 1, tutte le richieste riceveranno risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM A disposizione
- 4, alta qualità, design fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, Servizio post-vendita :
 - 1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
 - 2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, Consegna più rapida : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal, garanzia commerciale Ali
- 8, spedizione: abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere marittimo e aereo, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, ACM Goldbridge

fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.

- Al contrario, ACM Goldbridge richiederà un extra in caso di riparazione.

- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

La nostra azienda

Azienda industriale ACM Shenzhen Goldbridge

In qualità di uno dei principali produttori ed esportatori di prodotti RFID, controllo accessi e serrature elettriche in Cina, operiamo in questo campo già da 20 anni. Abbiamo una ricca esperienza di produzione ed esportazione di prodotti di serrature per controllo accessi RFID. I nostri prodotti di forza sono: Carta RFID, portachiavi RFID, braccialetto RFID, tag RFID e vari lettori RFID, lettore UHF a lungo raggio, serrature elettriche, . Siamo anche il fornitore di soluzioni per il controllo degli accessi.



Contattaci

Inviaci una richiesta e ordina ora per avere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni !!!
Siamo professionali e ci assicuriamo di poter offrire la migliore soluzione di un fornitore completo di prodotti per il controllo degli accessi con carta di sicurezza RFID con 20 anni di esperienza,

Quindi, Contattaci e invia i dettagli della tua richiesta qui sotto ora!

Non vediamo l'ora di stringere rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro!



**SHENZHEN GOLDBRIDGE
INDUSTRIAL CO., LTD**

Indirizzo:

Edificio 405, zona industriale di
Shangbu, distretto di Futian,
Shenzhen, Cina, 518031

Tel: + 0086-755-83767678 Fax: +
0086-755-88391348

Persona di contatto: Lily Jiang

Mob / whatsapp / wechat: +
0086-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales (at) goldbridge sz.com

Sito web: [http: // www. goldbridge
sz.com](http://www.goldbridge
sz.com)